


信任品牌，源自1917年

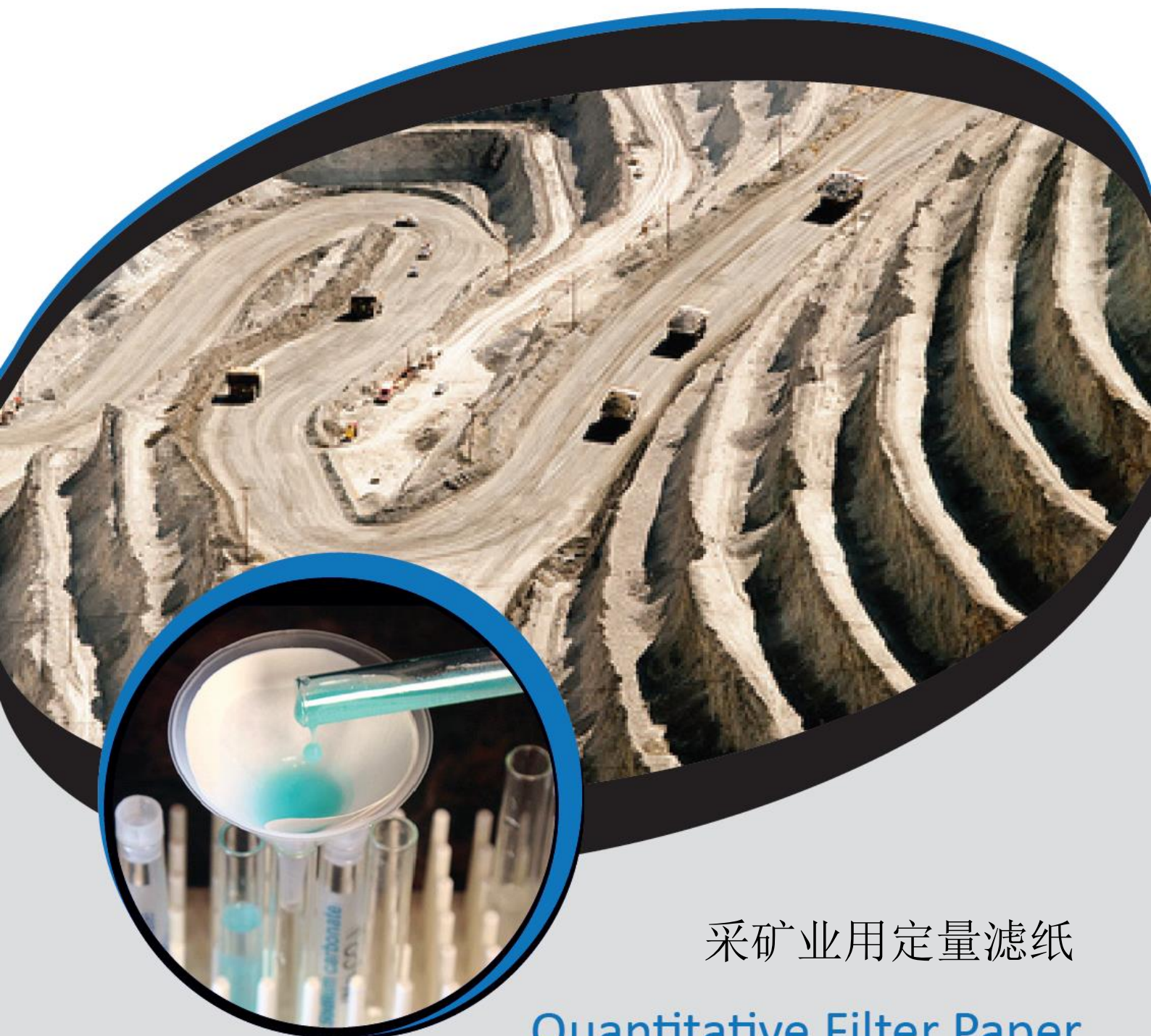

采矿业用定量滤纸

Quantitative Filter Paper
for the
Mining Industry

ADVANTEC® 了解样品的制备是矿石样品金属含量分析的关键步骤。因此，Advantec采用灰分含量低于0.01%的无灰优质过滤纸。可提供有各种性能特征且不同等级的产品，以满足针对待回收样品元素所要求的重要规格或基于颗粒保留率、过滤速度和金属含量的规范要求。

Advantec定量无灰滤纸由纯α棉纤维素制成，经双重酸洗，采用超纯水冲洗中和。这些滤纸的生产严格遵循质量控制标准，具有最高品质和性能的一致性，确保您的结果获得最大精确性。

应用:

No.3	No.5A	No.5B	No.5C	No.6	No.7
用于采矿和钢铁业中的土壤，肥料，水泥和矿物分析	保留粗糙，且为凝胶状的沉淀物，如氢氧化铝或氢氧化铁；钢中二氧化硅含量的测定	保留CaCO ₃ , PbSO ₄ , CaCO ₄ , MnCO ₃ , ZnCo ₃ , ZnS, AgCl等介质颗粒	收集SrSO ₄ , BaSO ₄ , HgCrO ₄ 等细小沉淀物；重量分析	保留微量和贵金属	用于保留介质颗粒最低灰分重量的精确重量分析

规格:

等级	名义停留率 (μm)	流动时间* (秒)	厚度(mm)	重量 (g/m ²)	流量特性	Whatman 相等的
No. 3	5 (中等)	130	0.23	113	快	43
No. 5A	7 (粗粒)	60	0.22	97	快	41
No. 5B	4 (中等)	195	0.21	108	中	40
No. 5C	1 (精细)	570	0.22	118	慢	42 或 44
No. 6	3 (中-细)	300	0.20	103	中	42
No. 7	4 (中等)	200	0.18	87	中	—

*流动时间是指使用面积为10平方厘米的过滤纸在由10cm水柱提供水压情况下过滤100ml (20℃) 蒸馏水时所需的用时，以秒为单位。

订购信息:

提供标准直径(毫米): 42, 5, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240
数量: 100 个过滤器/包。可提供其他等级和尺寸。

产品目录编号:

按指定等级订购其次按直径订购。
示例: 编号3 125mm, 编号5B 110mm

可提供纤维素粉末助滤剂和定性滤纸。



联系方式:

ADVANTEC®

ADVANTEC TOYO KAISHA, LTD.

邮政编码: 100-0011

地址: 日本东京千代田区内幸町2-2-3 日比谷国际大厦

电话: +81-3-5521-2181

传真: +81-3-5521-2182

电子邮箱: atk-otd@ADVANTEC.co.jp

网址: www.ADVANTEC.co.jp/en/