

MJW-9020は2段ラック式、  
MJW-9010は1段ラック式を採用。

### 特長


- 複雑化、微量化、量的にも急増する器具を、効率的、経済的に、しかも再実験に耐え得る高い精度で洗浄するジェット式器具洗浄機で、ドイツ連邦保健局(BGA)基準の洗浄が可能です。
- ユーザーズ・プログラムにより器具の形状、大小、汚染状況に合わせて、予洗→本洗→すすぎ→純水すすぎの各工程の最適洗浄パターンが書き込めます。
- ジェットラック(別売品)使用時は、内部洗浄ノズルによる強力なジェット噴射で洗浄します。同時に上部シャワーノズルで、器具外側も洗浄します。バイアル瓶、メスフラスコ、メスシリンダーなど、細口、小型器具の洗浄に適しています。
- 汎用ラック(標準装備)は、ビーカー、シャーレ、マイクロプレート、試験管など、広口器具の洗浄に適しています。器具の形状に合わせて、豊富な専用ラック(別売品)を汎用ラックの上に乗せて使用します。
- トラブルモニター、ドアチェック、ヒートショック防止機能を備えています。



MJW-9020

### 仕様


型 式	MJW-9020	MJW-9010	
外形寸法	W604mm×D620mm×H1,204mm		
内形寸法	W510mm×D505mm×H544mm		
外 装	ステンレス(ヘアライン仕上げ)		
内 装	ステンレス		
洗 浄	洗浄方式	上段:回転ノズル式またはジェットノズル式 下段:回転ノズル式またはジェットノズル式	
	すすぎ方式	パッチ式	
	ラック構造(段)	2	1
	排水方式	強制排水式	
	予 洗	0回~1回 0分~99分	0°C~95°C
	本 洗	0回~1回 0分~99分	0°C~95°C
	すすぎ	0回~9回 0分~99分	0°C~95°C
制 御	純水すすぎ	0回~9回 0分~99分	0°C~95°C
	給水回路	給水・給湯・純水3回路方式	給水・給湯/純水2回路方式
	使用水量(L)	15	13
	制御方式	マイコン制御方式	
ヒ ー タ ー	入力方式	テンキー+ファンクションキー方式	
	運転プログラム	9コース(任意書込み可能)	
電 源	4.5kW(湯沸かし用)		
洗 浄 ポ ンプ	AC200V 三相 50Hz/60Hz 20A 電源コード2.5m		
洗 剤 投 入 器	380W(高効率ポリユートポンプ)		
給 湯 配 管	2個		
給 水 ・ 純 水 配 管	PFめすねじホース(分岐水栓(おすねじ)をご用意ください)		
排 水 管	ワンタッチ脱着ホース		
質 量 (約kg)	122	110	
付 属 品	汎用ラック 排水ホース1本 給水ホース1本		
価 格 (税 抜 き)	¥1,500,000	¥1,200,000	

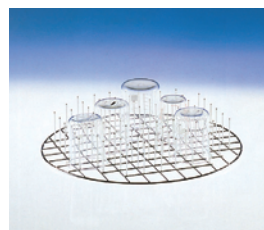

ビーカーラック (MJW-800BR)



下段ジェットラックセット (MJW-810JRS)

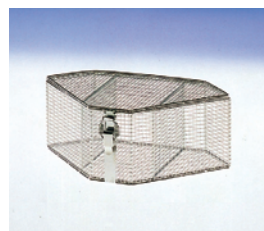

試験管ラック



バイアル瓶ジェットラック (MJW-820JR)

### 別売品

品 名	型 式	規 格	価 格 (税 抜 き)
ビーカーラック	MJW-800BR	ビーカー500cc15本	¥ 13,900
下段ジェットラックセット	MJW-810JRS	内部洗浄ノズル36か所	¥ 290,000
バイアル瓶ジェットラック	MJW-820JR	内部噴射口100か所	¥ 220,000
バイアル瓶ラック	MJW-800VR	3mLバイアル瓶50本収納	¥ 25,000
	MJW-820VR	1.5mL・2mLバイアル瓶50本収納	¥ 60,000
試験管ラック	MJW-800SR85	ラック全高85mm	¥ 13,000
	MJW-800SR100	ラック全高100mm	¥ 13,000
	MJW-800SR115	ラック全高115mm	¥ 13,400
	MJW-800SR130	ラック全高130mm	¥ 13,900
架 台	MJW-900KD	W650mm×D650mm×H440mm	¥ 48,500
アルカリ粉末洗剤	MJW-10AS	8kg入	¥ 18,000
純水タンク	MJW-900JTP	35L	¥ 155,000

● MJW-820JRとMJW-800VRは、セット製品です。MJW-820JRの上にMJW-800VRを装着して使用します(最大2個)。