

# ADVANTEC®

## 連帳式メンブレンフィルター メンブレンフィルターディスペンサー

CONTINUOUS BAND MEMBRANE FILTER  
MEMBRANE FILTER DISPENSER



MFD II-E+A045R047Z-P



アドバンテック東洋株式会社

# 連帳式メンブレンフィルター メンブレンフィルターディスペンサー

CONTINUOUS BAND MEMBRANE FILTER / MEMBRANE FILTER DISPENSER


微生物試験の際のフィルター汚染を回避することができ、作業効率の改善も図れます。

## 特長

- 連帳式メンブレンフィルターを専用のディスペンサーにセットして使用します。
  - ディスペンサーには、2つの運転モードが掲載され、ボタン操作による手動モードと近接センサーを利用した自動モードが選択可能です。
  - ディスペンサーのボタンを押す、またはセンサーに手をかざす度に連帳式の滅菌包装が1袋開封され、フィルター1枚がピンセットで摘みやすい位置に出てきます。
  - 作業者は、滅菌包装袋に触れることなくフィルターを取り出せるため、フィルター汚染のリスクが回避でき、作業効率の改善も図れます。
- また、開封した包装資材は、フィルムと台紙に分かれて巻き取られるため廃棄処分が容易です。
- AC電源駆動タイプ、またはAC電源/バッテリー駆動タイプよりお選びできます。
  - 別売品のフットスイッチを使用すると、足でのボタン操作が可能です。

## 仕様

品名	MFD II-E (AC電源駆動タイプ)	MFD II-B (AC電源/バッテリー駆動タイプ)
商品コード	42008030	42008040
外形寸法(約mm)	W172×D233×H230	
電源(50Hz/60Hz)	AC100V 0.8A	
質量(約kg)	2.4	2.6
充電時間	—	約7時間
価格(税抜き)	ご照会ください	

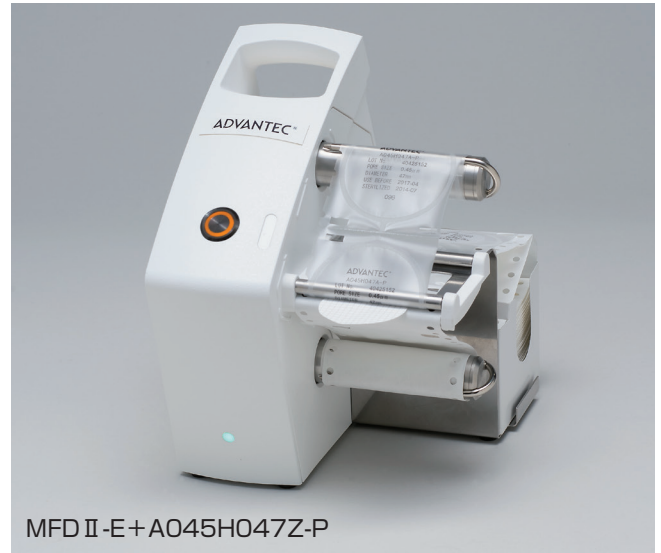

## 主要用途

- ビール、清涼飲料水などの微生物試験。

## 別売品



フットスイッチ

## 連帳式メンブレンフィルター

品名	商品コード	孔径(μm)	寸法(φmm)	色	表面	包装(枚/箱)	価格(税抜き)	
A080H047Z-P	10081124	0.80	47	白色	罫線	150	¥15,180	
A080R047Z-P	10083124			黒色			¥18,150	
A045H047Z-P	10041124	0.45		白色			罫線	¥15,180
A045R047Z-P	10043124			黒色				¥18,150
A045G047Z-P	10040124			白色	無地		¥15,180	
A045Q047Z-P	10042124			黒色			¥18,150	

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

**ADVANTEC**®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分  
出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- ADVANTECは、東洋濾紙株式会社とそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。